



**DESCRIPTION:**

The OASIS Medical SOFT PLUG® Extended Duration is a short term plug (less than 3 months based on results obtained in an animal study) designed to be inserted through the punctal opening into the canaliculus in order to block tear drainage through the lacrimal drainage system. This residency time fails between the absorbable collagen plugs, which are completely absorbed after several days, and the permanent intracanalicular plug, which is designed to remain in the canaliculus indefinitely.

SOFT PLUG® Extended Duration are made from an absorbable copolymer of glycolic acid and trimethylene carbonate and dyed with D&C Green Number 6. They are available in four diameters. The plugs are supplied sterile, two plugs per package, so that a plug can be placed into each canaliculus.

**INDICATIONS FOR USE:**

The SOFT PLUG® Extended Duration is intended for temporary use in patients experiencing dry eye symptoms such as redness, burning, reflex tearing, itching, or foreign body sensations which can be relieved by blockage of the canaliculus. They may be used in the treatment of dry eye syndrome and the dry eye components of various ocular surface diseases.

When indicated, the SOFT PLUG® Extended Duration may also be used after surgery on the eye to prevent complications due to dry eye and to enhance the retention of ocular medication on the eye.

**CONTRAINDICATIONS:**

The OASIS Medical SOFT PLUG® Extended Duration is contraindicated for patients with known sensitivities or allergies to glycolic acid or trimethylene carbonate and for patients who are experiencing epiphora, inflammation of the eye lid, or tearing secondary to dacryocystitis with mucopurulent discharge.

The plug is not intended for prophylactic use and should only be prescribed if dry eye symptoms are present.

**INSERTION:**

Prior to insertion of a SOFT PLUG® Extended Duration, inspect the patient's punctum to determine the appropriate diameter plug to use. Punctal sizing instruments are available from OASIS Medical.

Open the sterile Tyvek pouch and remove the appropriate diameter plug from the blue foam holder using jeweler's forceps.

A small amount of lubricant may be used on the plug or punctum in order to facilitate insertion across the punctum.

Insert the SOFT PLUG® Extended Duration part way through the punctal opening while grasping the plug with the forceps. Release the plug and use the tip of the forceps to push the rest of the way through the punctal opening and into the canaliculus.

**CAUTION:**

The OASIS Medical SOFT PLUG® Extended Duration may enhance the effect of ocular medication used on the eye. Depend-ing on the type of medications being used, dosage may need to be reduced accordingly.

Care should be used not to perforate the punctum or canaliculus while inserting the SOFT PLUG® Extended Duration. Perforations may cause pain and increase the risk of infection. If perforation occurs, delay the placement of the plug until the wound heals.

If patient experiences irritation, infection, or epiphora after insertion of a SOFT PLUG® Extended Duration, the plug should be removed. Saline irrigation or probing may be used to expel the plug through the lacrimal drainage system into the nose or throat.

**DO NOT REUSE:** This is a single use, disposable device that cannot be properly cleaned and re-sterilized.

Federal law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

**EN**

Symbol	Dansk	Symbol	Dansk	Symbol	Dansk	Symbol	Dansk
	Producent		Batchkode/partnr.		Må ikke gensteriliseres		Uden latex
	Autoriseret repræsentant i Europa		Katalognr.		Må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget		Se brugsanvisning
	Authorisert representant i Sveits		Unikt enheds-ID		Temperaturbegrenzung. Opbevaring mellem 0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)		Medicinsk udstyr
	Anvendes inden-dato		Steriliseret ved hjælp af etikett med enkelt steril barrieresystem		Må ikke genbruges		Websted med patientinformation
	Opbevarer tært						



**ES**

**DESCRIPCIÓN:**

SOFT PLUG® con duración prolongada de OASIS Medical, es un tapón temporal (menos de 3 meses, según resultados obtenidos en un estudio con animales) diseñado para ser insertado a través de la abertura del punto lagrimal en el canaliculo para bloquear la salida de las lágrimas a través del sistema de drenaje lagrimal. El tiempo que tiene que estar insertado SOFT PLUG® con duración prolongada dura desde la completa absorción de los tapones de colágeno absorbibles al cable de varios días y el tapón intracanalicular permanente, diseñado para permanecer en el canaliculo de forma indefinida.

SOFT PLUG® con duración prolongada están compuestos por un copolímero absorbible de ácido glicólico y carbonato de trimetileno teñido con verde D&C número 6. Están disponibles en cuatro diámetros. Los tapones se suministran estériles, dos por envase, de modo que pueda colocarse un tapón en cada canaliculo.

**INDICACIONES DE USO:**

SOFT PLUG® con duración prolongada está pensado para uso temporal en pacientes que experimentan síntomas de sequedad ocular, como encogimiento, ardor, lagrimeo reflejo, prurito o sensación de cuerpo extraño, que pueden aliviarse mediante el bloqueo de los canaliculos. Pueden utilizarse en el tratamiento del síndrome de sequedad ocular y de los síntomas de ojo seco que forman parte de diversas enfermedades de la superficie ocular.

Cuando esté indicado, SOFT PLUG® con duración prolongada puede utilizarla también después de la cirugía ocular para evitar complicaciones debidas a ojo seco y para aumentar la retención en el ojo de la medicación ocular.

**CONTRAINDICACIONES:**

SOFT PLUG® con duración prolongada de OASIS Medical está contraindicado para los pacientes con sensibilidades o alergias conocidas al ácido glicólico o al carbonato de trimetileno y para los pacientes que experimentan epifora, inflamación del párpado o lagrimeo secundario a dacriocistitis con secreción mucopurulenta. Este tapón no está creado para prevención y solo debería ser recetado si existen síntomas de ojo seco.

**INSERCIÓN:**

Antes de insertar SOFT PLUG® con duración prolongada inspeccione el punto lagrimal del paciente para determinar el diámetro apropiado del tapón que se debe utilizar. OASIS Medical dispone de instrumentos para medir el tamaño del punto lagrimal.

Abra la bolsa estéril Tyvek y retire el tapón de diámetro apropiado del embalaje azul de espuma utilizando unas pinzas de joyero.

Puede utilizarse una pequeña cantidad de lubricante en el tapón o en el punto lagrimal para facilitar la inserción a través de este último.

Introduzca la parte de SOFT PLUG® con duración prolongada a través de la abertura del punto lagrimal mientras se sujetela el tapón con las pinzas. Libere el tapón y use la punta de las pinzas para empujarlo el resto de la trayectoria a través del punto lagrimal y en el canaliculo.

**PRECAUCIÓN:**

SOFT PLUG® con duración prolongada de OASIS Medical puede potenciar el efecto de la medicación ocular utilizada en el ojo. Dependiendo del tipo de medicación que se esté utilizando, puede que sea necesario reducir la dosis según corresponda.

Deberá tener cuidado de no perforar el punto lagrimal ni los canaliculos mientras se inserta SOFT PLUG® con duración prolongada. Las perforaciones pueden causar dolor y aumento el riesgo de infección. En caso de perforación, retire la colocación del tapón hasta que se cure la herida.

Si el paciente experimenta irritación, infeción o epifora después de la inserción de SOFT PLUG® con duración prolongada, retire el tapón. Puede utilizarse irrigación con solución salina o una sonda para expulsar el tapón a través del sistema de drenaje lagrimal en la nariz o la garganta.

Ejercer presión constante sobre el tapón puede causar la rotura del mismo.

**NO VOLVER A USAR.** Este es un dispositivo descartable de un solo uso que no se puede limpiar y volver a esterilizar correctamente.

La ley federal de EE. UU. limita la venta de este dispositivo a médicos o por orden de los mismos.

**KONTAKTINDEKOMPLIKATIONER:**

Der SOFT PLUG® mit verlängerter Haltbarkeit von OASIS MEDICAL ist ein Plug zur kurzkfristigen Anwendung (weniger als 3 Monate, basierend auf Tierversuchen). Er wird durch das Tränenpünktchen in den Tränenkanal eingeführt, um den Abfluss von Tränenflüssigkeit durch das Tränenkanalsystem zu verhindern. Die Auflösungszeit des SOFT PLUG®, verlängerte Haltbarkeit liegt zwischen den absorbierenden Collagen-Plugs, welche sich nach einigen Tagen vollständig auflösen und den permanenten Tränenkanal-Plugs, welche über die Zeit im Tränenkanal verbleiben. Der Plug besteht aus einem absorbierenden Glykolsäure- und Trimethylethylenkarbonat-Kopolymer und ist mit D&C Grün Nr. 6.

Die SOFT PLUG® mit verlängerter Haltbarkeit ist ein vier Durchmessers erhältlich. Die Plugs werden steril in Packungen zu je zwei Stück geliefert, so dass es bei Bedarf eine Packung für jedes Auge benötigt wird.

Der SOFT PLUG® mit verlängerter Haltbarkeit ist ein Plug zur kurzfristigen Anwendung bei Patienten vorbereitet, die an den Symptomen des trockenen Auges leiden. Brennen, Bränden, Tränenflusserflex, Juckreiz oder Fremdkörpergefühl leiden. Durch Blockierung des Tränenkanals können diese Symptome gelindert werden. Sie können ebenfalls zur Behandlung der mit verschiedenen Erkrankungen der Augenoberfläche einhergehenden Augentrockenheit eingesetzt werden.

**ANWENDUNG:**

Vor der Anwendung des SOFT PLUG® mit verlängerter Haltbarkeit des Tränenpünktchens des Patienten inspizieren, um den geeigneten Plug-Durchmesser zu bestimmen. Instrumente zur Bestimmung der Größe des Tränenpünktchens sind von OASIS MEDICAL erhältlich.

Den sterilen Tyvek-Beutel öffnen und mit Hilfe einer Präzisionspinzette einen Plug des entsprechenden Durchmessers aus dem blauen Schaumstoffstein entnehmen.

Die Einführung in das Tränenpünktchen kann durch Auftragen von ein wenig Flüssigkeit auf den Plug oder das Tränenpünktchen erleichtert werden.

In den in der Pinzelteile gefassten SOFT PLUG® mit verlängerter Haltbarkeit teilweise in das Tränenpünktchen einführen. Den Plug freigeben und mit Hilfe der Pinzelteile des Rests des Plugs im Tränenkanal vorziehen.

**VORSICHT:**

Der SOFT PLUG® mit verlängerter Haltbarkeit von OASIS Medical kann die Wirkung von am Auge angewendeten Augenmedikamenten verstärken. Je nach Medikamenten ist evtl. die Dosierung entsprechend zu reduzieren.


Bei der Einführung des SOFT PLUG® mit verlängerter Haltbarkeit bitte mit großer Sorgfalt vorgehen, um das Tränenpünktchen oder den Tränenkanal nicht zu verletzen. Solche Verletzungen schmerzen schwerhaft sein und das Infektionsrisiko erhöhen. Im Falle einer Verletzung sollte das Einsetzen des Plugs bis zur Wundheilung verschoben werden.

Sollte es beim Patienten nach dem Einsetzen eines SOFT PLUG® mit verlängerter Haltbarkeit zu Reizungen, Infektionen oder Kanalobstruktion kommen, ist der Plug umgehend zu entfernen. Der Plug kann unter Verwendung von Kochsalzlösung oder durch Sonderung aus dem Tränenkanalsystem in Nase oder Rachenkanal gespült werden.

**NICHT WIEDERVERWENDEN.** Dies ist ein Gerät für den Einmalgebrauch, das nicht ordnungsgemäß gereinigt und erneut sterilisiert werden kann und deshalb nach einem einmaligen Gebrauch zu entsorgen ist.

Gemäß Bundesgesetzgebung der USA darf dieser Produkt nur von Ärzten bzw. auf ärztliche Verordnung verkauft werden.

Symbol	Deutsch	Symbol	Deutsch	Symbol	Deutsch	Symbol	Deutsch
	Hersteller		Chargen-Codel-Nummer		Nicht sterilisieren		Enthält kein Latex
	Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft		Katalognummer		Nicht verwenden, wenn die Packung beschädigt ist		Siehe Gebrauchsanweisung
	Bevollmächtigter in der Schweiz		Endezeitige Geräteteknung		Temperaturbegrenzung. Zwischen 0 °C und 35 °C (32 °F und 95 °F) lagern		Medizinprodukt
	Verfallsdatum		Sterilisiert mit Ethylenoxid mit einem sterilen Barrieresystem		Nicht wiederverwenden		Website für Patienteninformationen
							Trocknen halten

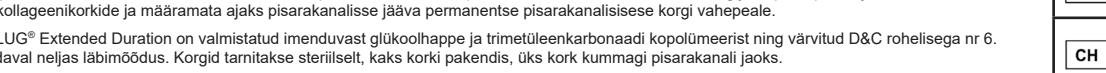

Yhdysvaltain liitovallton laki rajoittaa tämän laitteen myyntiä myyntiä lääkärin toimesta tai lääkärin määräyksestä.

Symbol	Suomi	Symbol	Suomi	Symbol	Suomi	Symbol	Suomi
	Välmistaja		Eräkoodi/eränumero		Ei saa steroidia uudelleen		Ei sisällä latexia
	Valtuuttu edustaja Euroopan yhteydessä		Luetelenumero		Ei saa käyttää, jos pakkaus on vahingoittunut		Tutustu käytöbhöyristiin
	Valtuuttu edustaja Sveitsissä		Yksilöllinen laitettavuus		Ei saa käyttää uuteen koteloon sisällä etylenioksidiillä esterifioituna		Lääkinälinnan laite
	Väimeinen käytönpäivämäärä		Etyleenioksidiillä esterifioituna		Ei saa käyttää uuteen koteloon sisällä etylenioksidiillä esterifioituna		Potilaan tietovuusto



**FR**

**DESCRIPTION :**

SOFT PLUG® Durée Prolongée est un tampon à court terme (moins de 3 mois, selon les résultats obtenus lors d'une étude sur des animaux) conçu pour être introduit à l'entrée du canal lacrymal. Le temps de vie que peut avoir le tampon dépend de l'absorption des collagènes.

**CONTRINDICACIONES**  
SOFT PLUG® Lunga Durata OASIS Medical es contraindicado en los pacientes con sensibilidad a la glicerina o al carbonato de trimetileno o en los pacientes que sufren de epifora, inflamación de la palpebra o lacrimación secundaria a dacrocistitis con excreción mucopurulenta. El tampon lacrimal no es proyectado para su uso profiláctico. El tampon lacrimal debe ser prescrito únicamente en presencia de síntomas de seccchezza ocular.

**INSERIMENTO**  
Primero del inserimento di SOFT-PLUG® Lunga Durata, esaminare attentamente il punto lacrimal del paziente per determinare il diametro adeguato del tampono. Alcuni strumenti specifici per determinare la misura del punto lacrimal sono disponibili sul mercato o presso OASIS Medical.

Apre la sacca sterile Tyvek e rimuovere il tampono dall'alloggiamento in espanso blu utilizzando una pinza da giocoliere.

È possibile utilizzare una sostanza lubrificante sul tampono o sul punto lacrimal in modo da rendere più semplice l'inserimento nel punto lacrimal.

Inserire profondamente la parte SOFT PLUG® Lunga Durata nell'apertura del punto lacrimal affermando contemporaneamente il tampono con la pinza. Rilasciare il tampono e usare la punta della pinza per spingerlo in fondo all'apertura del punto lacrimal e all'interno del canaliculo.

**ATTENZIONE**

SOFT PLUG® Lunga Durata OASIS Medical può migliorare l'effetto della medicazione oculare utilizzata sull'occhio. Il dosaggio può essere ridotto in base ai tipi di medicazioni utilizzate.

Procedere con cautela per non perforare il punto lacrimal o il canaliculo durante l'inserimento di SOFT PLUG® Durata, in quanto le perforazioni possono provocare dolore e aumentare il rischio di perforazione. In caso di perforazione, rimandare il posizionamento del tampono fino alla guarigione della ferita.

Dopo l'inserimento di SOFT PLUG® Lunga Durata compare irritazione, infusione o epifora, rimuovere il tampono. Per espellere il tampono attraverso il sistema di drenaggio lacrimali nel naso o nella gola si può utilizzare soluzioni fisiologiche o un sondino.

**NON RIUTILIZZARE.** Questo è un dispositivo monouso, che non può essere pulito o risterilizzato in modo appropriato.

Le leggi federali degli Stati Uniti limitano la vendita di questo dispositivo a medici o dietro prescrizione medica.



Den federala lagen i USA begränsar möjligheterna för att sälja denna enhet av eller enligt en läkares ordination.							
Symbol	Svenska	Symbol	Svenska	Symbol	Svenska	Symbol	Svenska
	Tillverkare		Partikol/partnummer		För inte omstenseras		Inget latex
	Autorisering representant från Europeiska unionen		Katalognummer		För inte användas om förpackningen är skadad		Läs bruksanvisningen
	Auktorisering representant i Schweiz		Unik enhetsidentifikator		Temperaturgräns. Förvaras mellan 0 °C och 35 °C (32 °F till 95 °F)		Medicinteknisk produkt
	Sista förbrukningsdag		Steriliserad med etylenoxid med ett enkelt steril bärnärsystem		Ska ej återanvändas		Webbida med patientinformation
	Håll torr						

**DESCRIÇÃO:**

O tampão intracanalicular de duração prolongada OASIS Medical SOFT PLUG® é um tampão de curto prazo (menos de 3 meses com base nos resultados obtidos num estudo com animais) concebido para ser inserido no canalículo lacrimal para bloquear a drenagem lacrimal através do sistema de drenagem lacrimal. O período de tempo em que o tampão pode estar inserido situa-se entre os dois tempos de colagénio absorvível, que são completamente absorvíveis após várias dias, e o tempo do tampão intracanalicular permanente, que foi concebido para permanecer indefinidamente.

Os tampões intracanaliculares de duração prolongada SOFT PLUG® são feitos de um copolímero absorvível de ácido glicólico e carbonato de trimetileno e líquidos com D&C verde n.º 8. Estão disponíveis em quatro diâmetros. Os tampões são fornecidos esterilizados e são dois tampões por embalagem, para que se possa colocar um tampão em cada canalículo.

**INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

O tampão intracanalicular de duração prolongada SOFT PLUG® destina-se à utilização temporária em pacientes que apresentam sintomas de olho seco, como vermelhidão, ardor, lacrimejamento reflexo, prurido ou sensações de corpo estranho que podem ser aliviados através do bloqueio do canalículo. Este tampão pode ser utilizado no tratamento da síndrome do olho seco e dos componentes do olho seco de várias doenças da superfície ocular.

Quando indicado, o tampão intracanalicular de duração prolongada SOFT PLUG® também pode ser utilizado após a cirurgia ocular para prevenir complicações devidas ao olho seco e para melhorar a retenção de medicamentos oculares no olho.

**CONTRINDICAÇÕES:**

O tampão intracanalicular de duração prolongada OASIS Medical SOFT PLUG® é contraindicado para pacientes com sensibilidades ou alergias conhecidas ao ácido glicólico ou ao carbonato de trimetileno e para pacientes que apresentam epifora, inflamação da palpebra ou lacrimejamento associado a dacrocistite com secreção mucopurulenta. Este tampão não se destina à utilização profilática e só deve ser prescrito se existem sintomas de olho seco.

**INSERÇÃO:**

Antes de inserir um tampão intracanalicular de duração prolongada SOFT PLUG®, examine o ponto lacrimal do paciente para determinar qual o diâmetro do tampão mais adequado. Os instrumentos de medição do orifício lacrimal encontram-se disponíveis na OASIS Medical.

Abra a embalagem estéril de Tyvek e remova o tampão de diâmetro adequado do suporte de resumo azul com uma pinça fina.

Pode-se colocar uma pequena quantidade de lubrificante no tampão ou no ponto lacrimal para facilitar a inserção através do mesmo.

Insera parte do tampão intracanalicular de duração prolongada SOFT PLUG® através da abertura do orifício lacrimal enquanto segura o tampão com a pinça. Solte o tampão e utilize a porta da pinça para empurrar o tampão para dentro do canalículo.

**CUIDADO:**

Os tampões intracanaliculares de duração prolongada OASIS Medical SOFT PLUG® podem aumentar o efeito da medicação ocular utilizada no olho.

Dependendo do tipo de medicamento utilizado, pode ser necessário reduzir a dosagem em conformidade.

Deve ter-se cuidado para não perfurar o ponto lacrimal ou canalículo durante a inserção do tampão intracanalicular de duração prolongada SOFT PLUG®. As complicações podem causar dor e aumento do risco de infecção. Se ocorrer perfuração, retarde a colocação do tampão até que a ferida cicatrize.

Se o paciente sentir irritação, infecção ou epifora após a inserção de um tampão intracanalicular de duração prolongada SOFT PLUG®, o tampão deve ser removido. Pode-se utilizar uma sonda ou irrigação com soro fisiológico através do nariz ou da garganta para remover o tampão através do sistema de drenagem lacrimal.

NÃO REUTILIZAR. Este é um dispositivo descartável, de utilização única, que não pode ser limpo e reesterilizado adequadamente.

A lei federal dos EUA só permite a venda deste dispositivo a médicos ou mediante receita médica.

Symbol	Português	Symbol	Português	Symbol	Português	Symbol	Português
	Fabricante		Código do lote/número do lote		Não reesterilizar		Sem latex
	Representante autorizado na Comunidade Europeia		Número de catálogo		Não utilizar se a embalagem estiver danificada		Consultar as instruções de utilização
	Representante autorizado na Suíça		Identificador único do dispositivo		Limitação de temperatura. Armazenar entre 0 °C e 35 °C (32 °F e 95 °F)		Dispositivo médico
	Data de validade		Esterilizado com óxido de etileno com sistema a estéril		Não reutilizar		Site web de informações para os pacientes
	Mantenê-lo seco						

**OMSCHRIJVING:**

De OASIS Medical SOFT PLUG® Verlengde Durar is een gecontraindiceerde voor patiënten die verschillende symptomen van droge ogen die door het blokkeren van de kanalculus kunnen veroorzaken, zoals roodheid, een brandend gevoel, reflexmatige opwelling van tranen, jeuk of sensatie van lichaamswarmte en niet-D&C groen nummer 6° gekleurd. De plugs zijn in vier diameter verkrijgbaar. De plugs worden steril gebruikt met twee plugs per pakketverpakking, zodat in elke kanalculus een plug kan worden aangebracht.

SOFT PLUG® Verlengde Durar is gemaakt van een resorbeerbare copolymer van glycolzuur en trimetylenecarbonaat en is niet-D&C groen nummer 6° gekleurd. De plugs zijn in vier diameter verkrijgbaar. De plugs worden steril gebruikt met twee plugs per pakketverpakking, zodat in elke kanalculus een plug kan worden aangebracht.

**INDICATIES:**

SOFT PLUG® Verlengde Durar is bestemd voor tijdelijk gebruik bij patiënten die lijden aan symptomen van droge ogen die door het blokkeren van de kanalculus kunnen veroorzaken, zoals roodheid, een brandend gevoel, reflexmatige opwelling van tranen, jeuk of sensatie van lichaamswarmte en niet-D&C groen nummer 6° gekleurd. De plugs zijn in vier diameter verkrijgbaar. De plugs worden gebruikt voor de behandeling van het droge oogssyndroom en de met droge ogen samenhangende klachten bij diverse aandoeningen van het oogoppervlak.

SOFT PLUG® Verlengde Durar kan ook op indicatie worden gebruikt na een oogoperatie om complicaties door droge ogen te voorkomen en het vasthouwen van oogmedicatie door het oog te bevorderen.

**CONTRA-INDICATIES:**

De OASIS Medical SOFT PLUG® Verlengde Durar is gecontraindicado para pacientes com conhecida sensibilidade ou alergia para glicóxilo ou trimetylenecarbonato e para pacientes com epifora, ostekrose, ou restrição de movimento do olho.

Instrumentos para medir o diâmetro da fenda lacrimal só devem ser usados se necessário reduzir a doseagem em conformidade.

Deve ter-se cuidado para não perfurar o ponto lacrimal ou canalículo durante a inserção do tampão intracanalicular de duração prolongada SOFT PLUG®. As complicações podem causar dor e aumento do risco de infecção. Se ocorrer perfuração, retarde a colocação do tampão até que a ferida cicatrize.

Se o paciente sentir irritação, infecção ou epifora após a inserção de um tampão intracanalicular de duração prolongada SOFT PLUG®, o tampão deve ser removido. Pode-se utilizar uma sonda ou irrigação com soro fisiológico através do nariz ou da garganta para remover o tampão através do sistema de drenagem lacrimal.

NÃO REUTILIZAR. Este é um dispositivo descartável, de utilização única, que não pode ser limpo e reesterilizado adequadamente.

A lei federal dos EUA só permite a venda deste dispositivo a médicos ou mediante receita médica.

**YERLEŞİRME:**

Bir SOFT PLUG® Extended Duration tıkanımı yerleştirmeden önce kullanıcılara uygun captaklı tıka bilirlemek için hastanın punktumunu inceleyin.

Punktalı boyutlandırma telileri OASIS Medical'den edinilebilir.

Steril Tyvek poşetini açın ve kuyumcu forspesi kullanarak mavi kopük tutucudan uygun captaklı tıka çıkarın.

Punkuma yerleştirme işlemi kolaylaşırken işin takipini için tıka birincil içine bir tıka yerleştirilmesi için her paketeki tıka olacak şekilde sterili olarak sağlanır.

**KULLANIM ENDİKASYONLARI:**

SOFT PLUG® Extended Duration: dizişlik, yanma, refleks yitirmesi, kasıntı veya yabancı cisim hissi gibi kanaliklarda giderilebilen kuru göz semptomları yaşayan hastalarla. Bu tıka, kuru göz sendromu ve çeşitli okul yüzey hastalıklarının kuru göz semptomlarının tedavisinde kullanılır.

Endik oldugu, SOFT PLUG® Extended Duration göz kuru sendromu bağlı komplikasyonları önlemek için tek kullanımlık tıka kullanılır.

**KONTREDİKASYONLAR:**

OASIS Medical SOFT PLUG® Extended Duration, kullanılan okullerin göz üzerindeki etkisini artırır. Kullanılan okuların türünde değişiklikler olabilir.

SOFT PLUG® Extended Duration tıkanımını yerleştirmek için tıka birincil içine bir tıka yerleştirilmesi gereklidir.

SOFT PLUG® Extended Duration tıkanımını yerleştirmek için tıka birincil içine bir tıka yerleştirilmesi gereklidir. Tıka kırılmaz.

SOFT PLUG® Extended Duration tıkanımını yerleştirmek için tıka birincil içine bir tıka yerleştirilmesi gereklidir. Tıka kırılmaz.

YENİDEN KULLANMAYIN. Bu, uygun şekilde temizlenmemeyen ve tekrar sterilize edilememeyen tek kullanımlık, atılabilecek bir cihazdır.

Federal yasa (ABD), bu cihazın satışı bir doktor tarafından veya bir doktor emriyle yapılacaktır şekilde kısıtlıdır.

**PODIUM:**

OASIS Medical SOFT PLUG® Verlengde Durar is kräktobdoba zátka (menej až 3 mesiace na základe výsledkov ziskaných v štúdiu na zlepšenie výkonu tkanív) a zároveň je založená na používaní s prehľadom klasifikácií výrobkových základov. Tento interval aplikácie predstavuje stredného medziu medzi všeobecnymi koloagénovými zátkami, ktoré sú uprostred výskumu v nekontrolovaných dôsledkoch, a tvrdou intrakanálkou zátkou, ktorá je náhradou za taktu v kanáliku na neutrál.

SOFT PLUG® Verlengde Durar je predloženou životnosťou sú vyrobené zo vstrebatelného polipómeru kyselinly glikolovej a trimetylénkarbonátu a farebnou sú označené zelenou farbou D&C Green Number 6. Sú k dispozícii v štyroch priemerach. Zátky sa dodávajú sterilne, v každom balení sú dve zátky, takže do každého kanálku možno umiestniť jednu zátku.

**INDIKÁCIE NA POVINNÉ:**

SOFT PLUG® Verlengde Durar je predloženou životnosťou možne zvýšiť účinkosť u pacientov s priznámkami suchého oka, ak sú začierané slizné výtoky alebo pocit čudzieho tela, ktoré sa môžu zmeniť zabilcováním kanskála. Môžu sa používať pri liečbe syndromu suchého oka a zložiek súčiasto rôznych ochorení povrchu oka.

V indikáciu súčiasto rôznych ochorení povrchu oka je predloženou životnosťou možne zvýšiť účinkosť u pacientov s priznámkami suchého oka a zložiek súčiasto rôznych ochorení